



Italian
Medical
Touch

MANUAL DE SERVICIO

WRITTEN
BY

MANUEL SACCANI
(Technical Service Manager)



Tabla de contenido

Instrucciones generales de seguridad.....	5
MEDIDAS SANITARIAS DE INTERVENCION.....	6
SOLUCION DE PROBLEMAS.....	7
PIEZAS O PARTES DE REPUESTO	8
PIEZA DE REPUESTO.....	8
DESCRIPCION	8
REF #	8
PIEZA DE REPUESTO.....	9
DESCRIPCION DE PIEZA DE REPUESTO.....	9
REF #	9
REEMPLAZO DE UNIDAD DE BOMBEO.....	10
PASOS PARA LA REPARACION.....	10
APERTURA DEL EQUIPO.....	10
DESCONECCION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y NEUMATICAS.....	10
EXTRACCION DE ELECTROBOMBA Y EXTRACCIO DE UNIDAD DE BOMBEO.	10
RESTAURANDO EL DISPOSITIVO	11
NOTAS	11
Fig.1 – COMPONENTES DE LA UNIDAD DE BOMBEO.....	11
REEMPLAZO DE UNIDAD DE MOTOR	12
PASOS PARA LA REPARACION.....	12
APERTURA DEL EQUIPO.....	12
Desprendimiento de conexiones eléctricas y neumática.....	12
REEMPLAZO DE LA ELECTROBOMBA Y MOTOR.....	12
RESTAURACION DEL DISPOSITIVO.....	13
NOTES	13
Fig.2 – ELEMENTOS DE MOTOR.....	13
REEMPLAZO TODA ELECTROBOMBA.....	14
PASOS REPARACION.....	14
DESMONTAJE DE CONEXIONES ELECTRICAS Y NEUMATICAS.....	14
EXTRACCION Y REPARACION ELECTROBOMBA COMPLETA.....	14
RESTAURACION DEL DISPOSITIVO.....	14
NOTES	14
Fig.3 – ELECTROBOMBA.....	15
REEMPLAZO DE SOPORTE ANTIVIBRANTE DE ELECTROBOMBA.....	16
PASOS.....	16
DESCONEXION DE CONEXIONES ELECTICAS Y MECAN.....	16
EXTRACCION Y REEMPLAZO DE SOPORTE ANTIVIBRANTE.....	16
RESTAURACION DEL DISPOSITIVO.....	16
REEMPLAZANDO LA UNIDAD REGULADORA.....	17
PASOS.....	17
APERTURA.....	17
DESCONECTAR LA CONEXION NEUMATCA Y SUSTITUIR LA UNIDAD REGULADOR.....	17
RESTAURANDO EL DISPOSITIVO.....	17
Fig.4 – ELEMENTOS DE UNIDAD REGULADORA.....	17
REEMPLAZANDO EL CAPACITOR.....	18
PASOS PARA LA REPARACION.....	18
APERTURA.....	18
RESTAURANDO EL DISPOSITIVO.....	18

REEMPLAZANDO EL INTERRUPTOR.....	19
PASOS PARA LA REPARACION.....	19
APERTURA.....	19
Desenchufando las conexiones eléctricas y reemplazando el INTERRUPTOR	19
RESTAURACION DEL DISPOSIT.....	19
RESTAURACION DE LA BASE DEL FUSIBLE.....	20
PASOS PARA LA REPARACION.....	20
APERTURA.....	20
DESENCHUFE DE CONEXIONES ELCTRICAS Y REEMPLAZO DE SOCATE DEL FUSIBLE.....	20
RESTAURANDO EL DISPOSITIVO.....	20
REEMPLAZO DE LA UNIDAD MEDIDORA DE VA.....	21
PSOS PARA LA REPARACION.....	21
APERTURA.....	21
NOTAS.....	21
Fig.5 – ELEMENTOS DE LA UNIDAD DE MEDICION DE VACIO.....	22
REEMPLAZO DE LA MANIJA.....	23
REPAIRING STEPS	23
APERTURA.....	23
REEMPLAZANDO LA MANIJA.....	23
RESTAURANDO EL DISPOSITIVO.....	23
REEMPLAZANDO LA PARTE INFERIOR.....	24
PASOS.....	24
APERTURA.....	24
DESCONECTANDO LAS CONEXIONES ELECTRICASA Y NEUMATICAS.....	
Desenchufando la electrobomba y reemplazando la parte inferior del dispositivo	24
RESTAURANDO EL EQUIP.....	24
FIG. 6 – NEW ASKIR 30 REF RE 310100/02 ELECTRIC DIAGRAM	25
FIG. 7 – NEW ASKIR 30 REF RE 310100/02 (RIF. ED.AS._04.0010-2) EXPLODED VIEW.....	26

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

**Lea atentamente todas las instrucciones de este manual cuando trabaje con este producto;
Cualquier intervención debe cumplir estrictamente con las instrucciones del fabricante.**

Cualquier intervención de reparación y / o mantenimiento debe ser realizada por personal calificado.

**CA-MI consideraba solo personal calificado con el certificado específico de calificación,
publicado solo después de un curso especial de CA-MI.**

**CA-MI no se responsabiliza de ningún daño o problema, por parte de personas o personas,
derivado de intervenciones que no cumplan estrictamente con este manual de instrucciones de
operación y mantenimiento.**



**Antes de cualquier intervención en el dispositivo, asegúrese de que el equipo esté
desenchufado de la fuente de alimentación.
Para mayor seguridad, asegúrese de desenchufar el cable de alimentación de la toma
eléctrica.**



**Lea atentamente el párrafo MEDIDAS SANITARIAS DE INTERVENCIÓN y siga estrictamente
todas las instrucciones que aparecen en él.**

MEDIDAS SANITARIAS DE INTERVENCIÓN

- a) Cualquier tipo de intervención de mantenimiento y / o reparación debe realizarse en un espacio dedicado y no en contacto con el entorno externo
- b) Es necesario usar ropa protectora adecuada (guantes de látex desechables, protector solar, mascarilla protectora desechable) antes de cualquier intervención en el dispositivo.
- c) Si el dispositivo resulta o se sospecha que está contaminado, consulte los puntos d), e), f), h).
- d) Los accesorios o parte de ellos que están contaminados deben reemplazarse y almacenarse como se describe en el punto e). La reparación puede causar contaminación tanto para el técnico como para el usuario final.
- e) Todas las piezas reemplazadas (bomba de vacío, unidad de motor, cubetas, accesorios, conjunto de tuberías, etc.) que se sospeche estén contaminadas con bacterias deben tratarse y almacenarse como material de hospital potencialmente contaminante.
- f) Todos los equipos CA-MI presentan dos dispositivos de seguridad que evitan este tipo de fallas (un dispositivo "demasiado lleno" y un filtro antibacteriano e hidrófobo). Cualquier penetración de contaminantes en el producto o en la unidad de la bomba se debe al uso incorrecto del propio producto (no uso del filtro antibacteriano, no sustitución del propio filtro, etc.). En este caso, podría existir un riesgo muy alto de contaminación bacteriana para todos los usuarios después de la intervención de asistencia técnica. Por lo tanto, la reparación es muy INCREÍBLE y CA-MI no se responsabiliza de las posibles consecuencias.
En este caso, CA-MI reemplazará todo el equipo por otro nuevo (vea el punto h).
Si el usuario desea continuar de todas maneras, debe considerar lo que se indica en el punto c) y actuar en consecuencia. Reemplazar todos los tubos y las tuberías internas es más recomendable que reparar la bomba de vacío contaminada. Debe reemplazarse en su totalidad y desecharse como se describe en el punto e).
- g) Cuando no hay contaminación interna, las intervenciones de asistencia técnica sobre los productos deben seguir las instrucciones en los puntos a) y b).
Antes de operar, retire los accesorios (tazón o bolsa desechable, tubería de succión y tuberías usadas) como se describe en el punto
- h) En caso de contaminación interna, debido a un uso incorrecto del producto, o en caso de falla de funcionamiento después de la finalización del período de garantía, debe comunicar a CA-MI toda la información sobre el NÚMERO DE LOTE y el NÚMERO DE SERIE del producto y deseche el producto como se describe en el punto e). CA-MI lo reemplazará por otro nuevo al costo de los euros

Para los casos restantes (ruptura, falla de operación debido a un defecto de fabricación, etc.) CA-MI reemplazará el equipo con otro nuevo.

SOLUCION DE PROBLEMAS

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Defecto típico	Identificando el fallo	SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
LA UNIDAD NO ENCIENDE: - El interruptor luminoso no se enciende y el motor no arranca - El interruptor se enciende pero el motor no arranca. - No gira y vibra ligeramente.	- Cable de alimentación interrumpido - Los fusibles interrumpieron dos para cortocircuitar o cambiar los cambios de voltaje - Cable interno desenchufado de la toma de corriente o del interruptor. - Motor bloqueado - Cable desenchufado del interruptor. - Cable del condensador desconectado - Condensador interrumpido	- Intente encender la unidad con otro cable de alimentación - Reemplace los fusibles; Si hay otra intervención mientras enciende la unidad, desmonte el equipo y conecte todos los cables al motor. El motor está en cortocircuito, entonces reemplácelo. - Abra el dispositivo y vuelva a enchufar los cables. - Reemplazar el motor - Vuelva a conectar el cable al interruptor - Reconecte el cable del capacitor - Reemplace el condensador
NO HAY SUCCION: - Controla el BOWL y la CUBIERTA. - Controlar el motor - Controlar el sistema neumático	- Desconecte todas las tuberías de accesorios del equipo; Encienda el interruptor, cierre la tubería con 0,80 bar. Si la exposición está disponible, el defecto está en los accesorios (en el otro caso vea el punto 5). - Si el problema ocurre con el vacío, es necesario desmontar el carenado superior, desconectar la tubería del motor y verificar la succión del motor con el toque (con un dedo). Tenga cuidado de NO TOCAR los cables y los contactos eléctricos (en caso de succión normal, consulte el punto 6). - Si durante el paso 5. el motor funciona bien, es necesario controlar el circuito neumático (tuberías, unión de tuberías, regulador, tubería gruesa). Verificar su fijación e integridad.	- Asegúrese de que los accesorios no estén rotos o agrietados y verifique el ensamblaje correcto; - Asegúrese de que el filtro antibacteriano no esté obstruido. - Reemplace el motor: un uso erróneo del producto podría haber causado la infiltración de moco en el motor, obstruyéndolo. - Repáre eventuales partes móviles y reemplace las defectuosas. Es posible detectar defectos debidos a incrustaciones de moco .
El aparato es muy ruidoso	Rotura o desconexión de componentes internos.	Restaura la fijación o sustituya las piezas defectuosas y / o rotas.
EL PRODUCTO NO RECARGA (solo para equipos con batería)	- Tarjeta interrumpida - Clip de carga desconectado	- Reemplace la tarjeta (posible cortocircuito dos a una infiltración de moco) - Vuelva a conectar el clip de carga

PIEZAS DE RECAMBIO PRINCIPALES DISPONIBLES

En el mesa nosotros informe todos la de repuesto partes suministrado por CA-MI para su Sustitución en caso de fallo , desgaste y rotura. o dañar

PIEZA DE RECAMBIO	DESCRIPCION DE LA PIEZA DE RECAMBIO	REF #
JUEGO DE BOMBA	Eso incluye todos la ya ensamblado neumático partes de la bomba electro- y la componentes cual regreso la mecánico fuerza viniendo desde la motor eléctrico listo para ser conectado a la motor electrico	SP 0022
SET MOTOR	Eso incluye todos la eléctrico partes de la bomba electro-, la móvil fijación sistema y el condensador, ya montado y listo para ser conectado a la neumático parte del motor y luego fijo en la móvil en sí.	SP 0023/01
TODA ELECTRO-BOMBA	los de repuesto parte incluye la todo ya ensamblado bomba electro-, completa de neumático partes (entero) set de bomba) y de electrica partes (motor eléctrico y componentes cual regreso la mecánico fuerza), y con el condensador y el silenciador , también .	MA 310100/02
Unidad reguladora	Eso incluye no solamente la todo ya ensamblado regulador , pero además la todo sujetador, con el fin de fijar al dispositivo de mercado	SP 0006/03
CONDENSADOR	Eso solamente incluye el condensador	SP 0024
CAMBIAR	Eso incluye solamente la cambiar con sus cubrir. los embalaje Contiene n ° 2 kits completos.	SP 0009/04
TUBOS INTERNOS	Eso incluye un tramo de madeja de tubo largo suficiente para reemplazar cada parte de la interno neumático circuito.	SP 0026/04
SOCKET CARRERA FUSIBLE	Eso incluye la toma de corriente (sin fusible).	SP 0086/02
UNIDAD DE METRO DE VACÍO	Eso incluye la medición herramienta y la todo sujetador para arreglar al dispositivo de mercado	SP 0017
ENCARGARSE DE	Eso solamente incluye la encargarse de	SP 0014/01
TODO EL DISPOSITIVO	Eso incluye la dispositivo de fondo con pre ensamblado ruedas.	SP 0134
CABLE DE ALIMENTACION	Eso solamente incluye la poder espinal.	SP 0021
KIT MOTOR ANTIVIBRACION	Eso solamente incluye el componente de motor de vibración anti-. los embalaje contiene n ° 3 piezas	SP 0025/02
TARJETA COMPLETA 1000cc	Eso incluye el tarro de 1000 ml con la cubrir con válvula " demasiado llena" , todos esterilizable. los arco es ya Montado y listo para ser utilizado .	RE 210001
Tapa del jarro	Eso incluye la cubierta , con válvula " demasiado llena" , todo esterilizable. los cubrir es ya Montado y listo para ser utilizado .	RE 210352

PIEZA DE RECAMBIO	DESCRIPCION DE LA PIEZA DE RECAMBIO	REF #
Jar de 1000 ml	Eso incluye el 1000ml entero bol, esterilizable con autoclave. los tarro es Listo para ser utilizado .	RE 210003
TARJETA DE 2000cc COMPLETA	Eso incluye el cuenco de 2000 ml con la cubrir con válvula " demasiado llena" , todos esterilizable. los tarro es ya Montado y listo para ser utilizado .	RE 210351
JAR 2000cc	Eso incluye el todo 2000ml bol, esterilizable con autoclave.	RE 210353
KIT DE SUCCION (SIN FILTRO)	Eso incluye la transparente Kit de tubos de silicona para conectar. la tazón para el externo conector y el tubo palpador apropiado. Antibacteriano filtro NO incluido .	RE 210355/02
KIT DE SUCCION (Con filtro)	Eso incluye la transparente tubos de silicona para la Conexiones , recipiente-filtro-dispositivo y antibacteriano n ° 1. filtro.	SP 0036/01
FILTRO ANTIBACTERIAL	los embalaje incluye solamente la filtro. (El código se refiere a la de un solo componente).	SP 0046
FILTRO ANTIBACTERIAL	los embalaje incluye solamente la filtro. (El código se refiere al paquete de 10 piezas) de	SP 0046/01
Sonda de succión	Eso solamente incluye la sonda (10pz) en estéril original paquete.	RE 210400
UNIÓN CÓNICA PARA LAS SONDAS DE SUCCIÓN	Eso solamente incluye la cónico la unión.	RE 210410

NÓTESE BIEN:

Varios otro accesorios están disponibles, así, como se indica en la CA-MI precio lista.

REEMPLAZO DE LA UNIDAD DE BOMBA

All the references indicated below refer to the FIG.7 p.29 exploded view

EQUIPAMIENTO REQUERIDO

- Destornillador eléctrico / neumático con brocas para incisión en forma de cruz (o destornillador con forma de cruz)
- Alicates
- Llave hexagonal CH7
- Llave hexagonal CH3

Pasos para la Reparacion

Apertura

A. Desenchufe el dispositivo de la toma de corriente..

B. Coloque el dispositivo en una superficie plana y seca (cubierta con material antideslizante y antirayas si es posible) para que el panel de control se dirija al usuario.

C. Coloque el dispositivo boca abajo y desenrosque los 4 tornillos (POS. 57) en la parte inferior que fijan el panel superior (POS. 44) hacia abajo (POS. 53). Abra el dispositivo, asegúrese de no tocar las conexiones eléctricas y neumáticas que conectan los componentes en la parte inferior y en el dispositivo y no permita la extracción completa del móvil en sí.

Desconexión de conexiones eléctricas y neumáticas.

A. Corte las bandas que aprietan los cables internos entre sí, desenchufe los dos cables que vienen de la Motor (POS. 25) del interruptor (POS. 46) colocado en el panel de control.

B. Tome con las manos o con alicates el tubo de silicona transparente 6x10 (POS. 29) que conecta el Succione la unión del tubo de la unidad de bombeo y desconéctela dejándola conectada al circuito neumático.

C. Desconecte del otro extremo de la cabeza el tubo con el silenciador 8POS. 27 - 28 - 29) asegurándose

No dañarlo, para volver a utilizarlo con la bomba. Ahora el móvil está desconectado de las otras partes del dispositivo y se puede colocar separado; La electrobomba está libre de conexiones eléctricas o neumáticas.

Extracción de la electrobomba y sustitución de la UNIDAD DE BOMBA.

A. Usando una llave hexagonal CH7, desenrosque los 4 tornillos (POS. 2) que bloquean los soportes antivibrantes (POS. 1) de la placa (POS. 4) en la parte inferior, trabajando debajo del dispositivo. **B.** Ahora el motor está libre: sepárelo de la parte inferior.

C. Coloque el motor en la mesa de trabajo: el ventilador debe estar en el lado derecho del usuario y la cabeza en el lado opuesto del usuario. Ahora el usuario puede ver la cámara de la biela desde la cual el usuario puede operar en el motor excéntrico.

D. Con una mano, gire el ventilador del motor hasta que la cámara del grano (POS. 10) de fijación del excéntrico (POS. 11) sea bien visible, con la llave CH4 desenrosque el grano y extraiga del lado izquierdo la biela / Sistema excéntrico del árbol motor.

E. Ahora coloque el motor con el cabezal a un lado del usuario y desatornille los 4 tornillos de fijación de la unidad de la bomba (POS. 20). Ahora extraiga toda la unidad de la bomba (de POS. 8 a POS. 20). **F.** Inserte la nueva unidad de bombeo funcionando de la siguiente manera:

- Inserte el pistón completo (desde la POS. 8 a la POS. 14), insertando la excéntrica en el orificio que queda libre después de la extracción de la unidad de bombeo dañada, ahora inserte el árbol del motor en el orificio de la excéntrica y apriete el grano. de lo excéntrico.
- Inserte el cilindro (POS. 15) en el orificio circular del soporte de la bomba; El lado del cilindro con la embotadura debe permanecer en el sistema. Insertar en el cilindro el pistón.
- Tome el soporte del cilindro (POS. 17) e inserte la membrana (POS. 18) bloqueando los dos orificios en los dos cilindros de referencia. Inserte el O-RING (POS. 16) en el lado opuesto del soporte.
- Bloquee el lado con la junta tórica del soporte del cilindro en la parte del cilindro que se ve desde el soporte de la bomba e inserte la cabeza (POS. 19) o la parte del soporte del cilindro que permanece externa, de modo que los orificios De la cabeza están en las referencias del soporte del cilindro.
- Cuando el cabezal está bien bloqueado, gire la unión de la tubería en la misma dirección del motor eléctrico, luego bloquee todo el sistema atornillando la bomba y apoye los 4 tornillos de fijación (POS. 20).

Restaurando el dispositivo

A. Coloque la electrobomba en la parte inferior, inserte los antivibrantes en los orificios de la parte inferior. La orientación de la bomba está determinada por los agujeros en la parte inferior. Desde debajo de la parte inferior, atornille, en los antivibrantes visibles, los tres tornillos de fijación (POS. 63) y apriételos fuertemente para bloquear el motor.

B. Coloque el motor al lado de la parte inferior y restaure el circuito eléctrico (esquema eléctrico en la página 28) conectando los extremos de los cables del motor negro y azul previamente desenchufados a los extremos que quedan libres en el interruptor (POS. 46). Asegúrese de que los cables aún estén bien apretados junto con una banda.

C. Restaure el circuito neumático conectando nuevamente el tubo de aire que queda libre en el dispositivo al tubo de succión de la cabeza. Inserte nuevamente el silenciador con el tubo previamente extraído en el otro extremo de la cabeza y fíjelo como estaba antes de usar una banda específica (POS. 61)


D. Coloque de nuevo el móvil en la parte inferior en la posición final y, antes de cerrar definitivamente el dispositivo, controle el éxito de la intervención conectándolo a la fuente de alimentación, encendiéndolo y verificando que la aspiración máxima (obtenida al cerrar el extremo del tubo de succión) es igual o más de $-0,80$ bar (visible en el medidor de vacío).

E. Si todo está bien, desenchufe nuevamente el dispositivo de la fuente de alimentación y cierre la cubierta atornillando los 4 tornillos de fijación (POS. 54), prestando atención al zócalo del portafusibles (POS. 54) que debe insertarse en el orificio creado entre la parte inferior (POS. 53) y la placa superior (POS. 44) del dispositivo. Por el contrario, si el dispositivo no se enciende, si es demasiado ruidoso o presenta algunos problemas con el valor de la presión máxima, desenchúfelo de la fuente de alimentación y controle que las conexiones eléctricas y neumáticas y el acampar de las partes internas están todos completos Si el problema persiste, controle el dispositivo, como se describe en la tabla en la página 7 y / o póngase en contacto con el servicio técnico de CA-MI.

NOTAS

La fabricación de CA-MI siempre recomienda reemplazar todo el conjunto de tuberías internas que constituye el circuito neumático, siempre que se requiera tal intervención. Este reemplazo es necesario para restaurar totalmente la eficiencia del circuito de succión. Por esta razón hay kits de reemplazo específicos disponibles.

Fig.1 - Componentes de la bomba

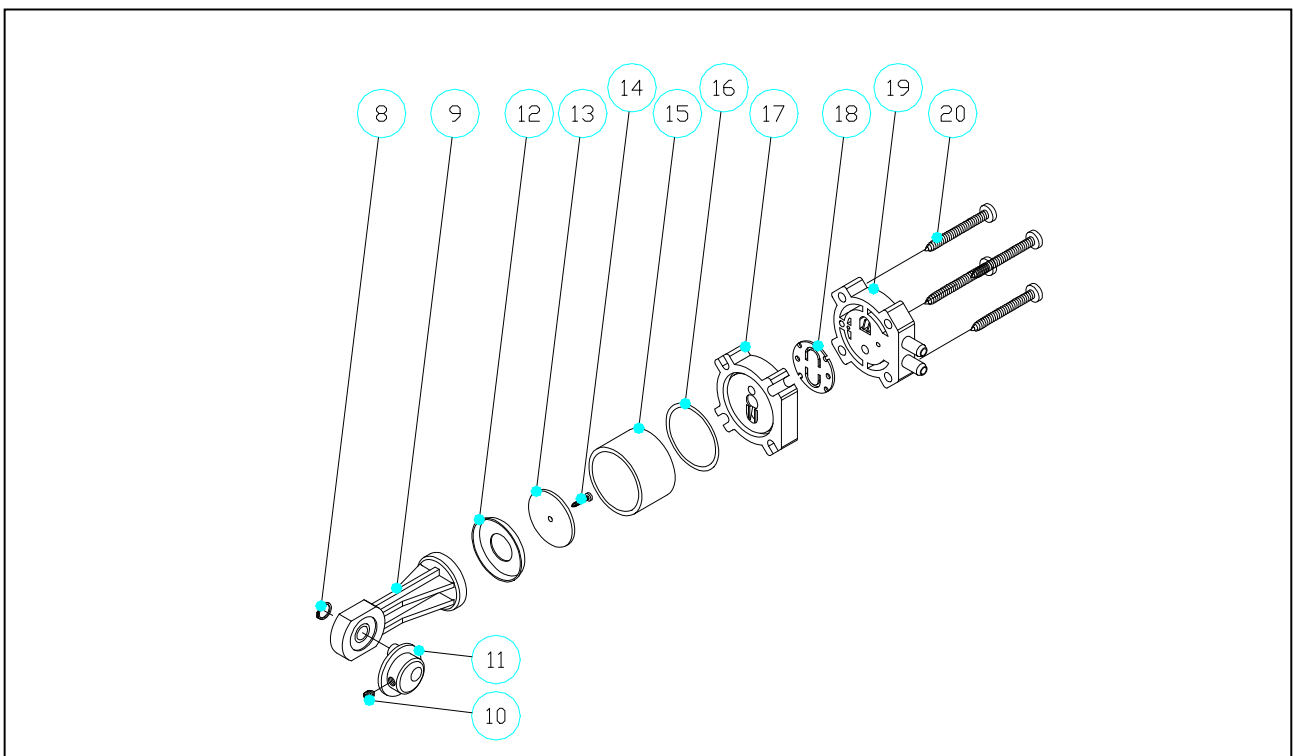

Equipo requerido

- Destornillador eléctrico / neumático con brocas para incisión en forma de cruz (o destornillador con forma de cruz)
- Alicates
- Llave hexagonal CH7
- Llave Allen CH3 REPARACION DE PASOS

Apertura móvil

A. Desenchufe el dispositivo de la toma eléctrica.

B. Coloque el dispositivo en una superficie plana y seca (cubierta con material antirresbaladizo y antirayas si es posible) para que el panel de control se dirija al usuario.

C. Coloque el dispositivo boca abajo y desatornille los 4 tornillos (POS. 57) en la parte inferior que fijan el panel superior (POS. 44) a la parte inferior (POS. 53). Abra el dispositivo, asegúrese de no tocar las conexiones eléctricas y neumáticas que conectan los componentes en la parte inferior y en el dispositivo y no permita la extracción completa del móvil en sí.

Desprendimiento de conexiones eléctricas y neumáticas.

A. Corte las bandas que aprietan los cables internos, luego desenchufe los dos cables delgados que vienen del motor (POS. 25) de los contactos del interruptor (POS. 46) ubicados en el panel de control (POS. 52).

B. Tome el tubo de silicona transparente 6x10 (POS.29) que se conecta al extremo del tubo de succión con las manos o con alicates y desconéctelo, dejándolo todavía conectado al circuito neumático restante.

C. Desconecte también la tubería con sistema silenciador (POS. 27 - 28 - 29) del otro extremo de la cabeza; asegúrese de no dañarlo durante esta operación para que se pueda usar nuevamente con la nueva unidad de bomba. Ahora el móvil está separado del dispositivo y se lo coloca separado hasta que se vuelva a montar en la parte inferior del móvil y la electrobomba no tenga conexiones eléctricas ni neumáticas.

Extracción de la electrobomba y sustitución de la UNIDAD DEL MOTOR.

G. Usando una llave hexagonal CH7, desatornille los 4 tornillos (POS. 2) que bloquean los soportes antivibrantes (POS. 1) de la placa (POS. 4) en la parte inferior, trabajando debajo del dispositivo. H. Ahora el motor está libre: sepárelo de la parte inferior.

I. Coloque el motor en la mesa de trabajo: el ventilador debe estar en el lado derecho del usuario y la cabeza en el lado opuesto del usuario. Ahora el usuario puede ver la cámara de la biela desde la cual el usuario puede operar en el motor excéntrico.

J. Con una mano, gire el ventilador del motor hasta que la cámara del grano (POS. 10) de fijación del excéntrico (POS. 11) sea bien visible, con la llave CH4 desenrosque el GRANO y extraiga del lado izquierdo la biela / Sistema excéntrico del árbol motor.

K. Ahora coloque el motor con la cabeza en el costado del usuario y desatornille los 4 tornillos de fijación de la unidad de la bomba (POS. 20). Ahora extraiga toda la unidad de la bomba (de POS. 8 a POS. 20). L. Inserte la nueva unidad de bombeo funcionando de la siguiente manera:

- Inserte el pistón completo (desde la POS. 8 a la POS. 14), insertando la excéntrica en el orificio que queda libre después de la extracción de la unidad de bombeo dañada, ahora inserte el árbol del motor en el orificio de la excéntrica y apriete el grano. de lo excéntrico.
- Inserte el cilindro (POS. 15) en el orificio circular del soporte de la bomba; El lado del cilindro con la embotadura debe permanecer en el sistema. Insertar en el cilindro el pistón.
- Tome el soporte del cilindro (POS. 17) e inserte la membrana (POS. 18) bloqueando los dos orificios en los dos cilindros de referencia. Inserte el O-RING (POS. 16) en el lado opuesto del soporte.
- Bloquee el lado con la junta tórica del soporte del cilindro en la parte del cilindro que se ve desde el soporte de la bomba e inserte la cabeza (POS. 19) o la parte del soporte del cilindro que permanece externa, de modo que los orificios De la cabeza están en las referencias del soporte del cilindro.
- Cuando el cabezal está bien bloqueado, gire la unión de la tubería en la misma dirección del motor eléctrico, luego bloquee todo el sistema atornillando la bomba y apoye los 4 tornillos de fijación (POS. 20).

Restauracion del Dispositivo

A. Coloque la electrobomba en la parte inferior, inserte los antivibrantes en los orificios de la parte inferior. La orientación de la bomba está determinada por los agujeros en la parte inferior. Con 3 tornillos M6 y 3 arandelas dentadas M6 (POS. 62 - 63) apriete los antivibrantes a la placa. Desde debajo de la parte inferior, atornille, en los antivibrantes visibles, los tres tornillos de fijación (POS. 63) y apriételos fuertemente para bloquear el motor.


B. Coloque el motor al lado de la parte inferior y restaure el circuito eléctrico (esquema eléctrico en la página 28) conectando los extremos de los cables del motor negro y azul previamente desenchufados a los extremos que quedan libres en el interruptor (POS. 46). Asegúrese de que los cables aún estén bien apretados junto con una banda.

C) Restaure el circuito neumático conectando nuevamente el tubo de aire que queda libre en el dispositivo al tubo de succión de la cabeza. Inserte nuevamente el silenciador con el tubo previamente extraído en el otro extremo de la cabeza y fíjelo como estaba antes de usar una banda específica (POS. 61)

D) Coloque de nuevo el móvil en la parte inferior en la posición final y, antes de cerrar definitivamente el dispositivo, controle el éxito de la intervención conectándolo a la fuente de alimentación, encendiéndolo y verificando que la máxima succión (obtenida cerrando el extremo del tubo de succión) es igual o más de $-0,80$ bar (visible en el medidor de vacío).

E) Si todo está bien, desenchufe nuevamente el dispositivo de la fuente de alimentación y cierre la cubierta atornillando los 4 tornillos de fijación (POS. 54), prestando atención al zócalo del portafusibles (POS 54) que debe insertarse en el orificio creado. entre la parte inferior (POS. 53) y la placa superior (POS. 44) del dispositivo. Por el contrario, si el dispositivo no se enciende, si es demasiado ruidoso o presenta algunos problemas con el valor de la presión máxima, desenchúfelo de la fuente de alimentación y controle que las conexiones eléctricas y neumáticas y el acampar de las partes internas están todos completos Si el problema persiste, controle el dispositivo, como se describe en la tabla en la página 7 y / o póngase en contacto con el servicio técnico de CA-MI.

Fig.2 – Motor Unit Elements.

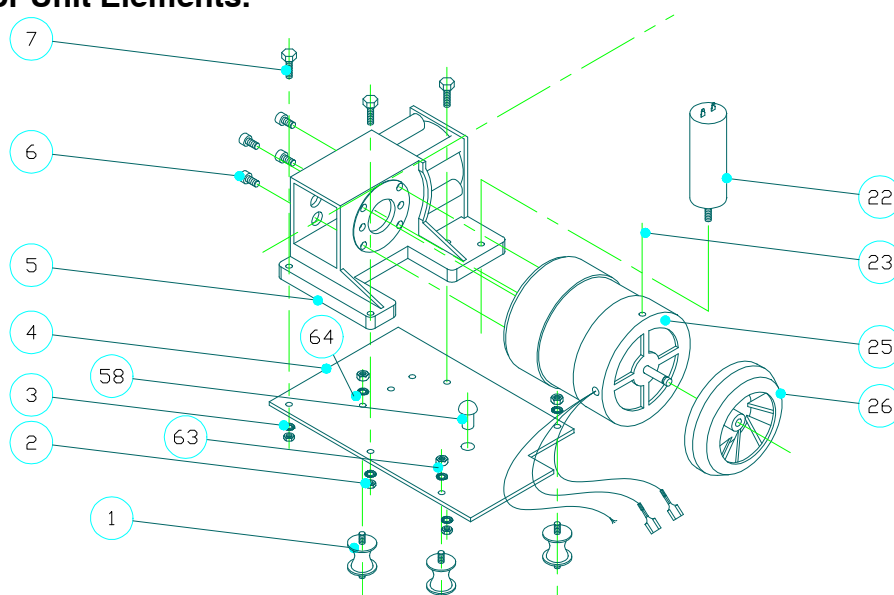

REEMPLAZO DE TODA ELECTROBOMBA

All the references indicated below refer to the FIG. 7 p. 29 exploded view

EQUIPAMIENTO REQUERIDO

- Destornillador eléctrico / neumático con brocas para incisión en forma de cruz (o destornillador con forma de cruz)
- Alicates
- Llave hexagonal CH10

PASOS PARA LA REPARACION

APERTURA

A. Desenchufe el dispositivo de la toma eléctrica.

B. Coloque el dispositivo en una superficie plana y seca (cubierta con material antirresbaladizo y antirayas si es posible) para que el panel de control se dirija al usuario.

C. Coloque el dispositivo boca abajo y desatornille los 4 tornillos (POS. 57) en la parte inferior que fijan el panel superior (POS. 44) a la parte inferior (POS. 53). Abra el dispositivo, asegúrese de no tocar las conexiones eléctricas y neumáticas que conectan los componentes en la parte inferior y en el dispositivo y no permita la extracción completa del móvil en sí.

Desprendimiento de conexiones eléctricas y neumáticas.

A. Corte las bandas que aprietan los cables internos, luego desenchufe los dos cables delgados que vienen del motor (POS. 25) de los contactos del interruptor (POS. 46) ubicados en el panel de control (POS. 52).

B. Tome el tubo de silicona transparente (POS.29) que se conecta al extremo del tubo de succión con las manos o con unos alicates y desconéctelo, dejándolo aún conectado al circuito neumático restante.

C. Desconecte también la tubería con sistema silenciador (POS. 27 - 28 - 29) del otro extremo de la cabeza; asegúrese de no dañarlo durante esta operación para que se pueda usar nuevamente con la nueva unidad de bomba. Ahora el móvil está separado del dispositivo y se puede separar hasta que se vuelva a montar en la parte inferior del móvil y la electrobomba no tenga conexiones eléctricas ni neumáticas.

Extracción y sustitución de toda la electro-bomba.

A. Usando una llave hexagonal CH7, desatornille las 3 tuercas (POS. 63) que bloquean los soportes antivibrantes (POS. 1) del motor a la parte inferior, trabajando debajo del dispositivo (POS. 53).

Destornille y extraiga los elementos de fijación de la electrobomba.

B. Ahora el motor está libre: sepáralo de la parte inferior

C. Tome la bomba eléctrica de reemplazo completa y colóquela en la parte inferior, insertando los antivibrantes en los orificios de la parte inferior. La orientación de la bomba está determinada por los agujeros en la parte inferior. Desde debajo de la parte inferior, atornille, en los antivibrantes visibles, los tres tornillos de fijación (POS. 63) y apriételos fuertemente para bloquear el motor.

Restaurando el dispositivo

A. Coloque la electrobomba en la parte inferior, inserte los antivibrantes en los orificios de la parte inferior. La orientación de la bomba está determinada por los agujeros en la parte inferior. Con 3 tornillos M6 y 3 arandelas dentadas M6 (POS. 62 - 63) apriete los antivibrantes a la placa. Desde debajo de la parte inferior, atornille, en los antivibrantes visibles, los tres tornillos de fijación (POS. 63) y apriételos fuertemente para bloquear el motor.

B. Coloque el motor al lado de la parte inferior y restaure el circuito eléctrico (esquema eléctrico en la página 28) conectando los extremos de los cables del motor negro y azul previamente desenchufados a los extremos que quedan libres en el interruptor (POS. 46). Asegúrese de que los cables aún estén bien apretados junto con una banda.

C. Restaure el circuito neumático conectando nuevamente el tubo de aire que queda libre en el dispositivo al tubo de succión de la cabeza. Inserte nuevamente el silenciador con el tubo previamente extraído en el otro extremo de la cabeza y fíjelo como estaba antes de usar una banda específica (POS. 61)


D. Coloque de nuevo el móvil en la parte inferior en la posición final y, antes de cerrar definitivamente el dispositivo, controle el éxito de la intervención conectándolo a la fuente de alimentación, encendiéndolo y verificando que la aspiración máxima (obtenida al cerrar el extremo del tubo de succión) es igual o más de – 0,80 bar (visible en el medidor de vacío).

E. Si todo está bien, desenchufe nuevamente el dispositivo de la fuente de alimentación y cierre la cubierta atornillando los 4 tornillos de fijación (POS. 54), prestando atención al zócalo del portafusibles (POS 54) que debe insertarse en el orificio creado. entre la parte inferior (POS. 53) y la placa superior (POS. 44) del dispositivo. Por el contrario, si el dispositivo no se enciende, si es demasiado ruidoso o presenta algunos problemas con el valor de la presión máxima, desenchúfelo de la fuente de alimentación y controle que las conexiones eléctricas y neumáticas y el acampar de las partes internas están todos completos Si el problema persiste, controle el dispositivo, como se describe en la tabla en la página 7 y / o póngase en contacto con el servicio técnico de CA-MI.

NOTAS

La fabricación de CA-MI siempre recomienda reemplazar todo el conjunto de tuberías internas que constituye el circuito neumático, siempre que se requiera tal intervención. Este reemplazo es necesario para restaurar totalmente la eficiencia del circuito de succión. Por esta razón están disponibles kits de reemplazo específicos.

Fig.3 – Whole Electro-pump

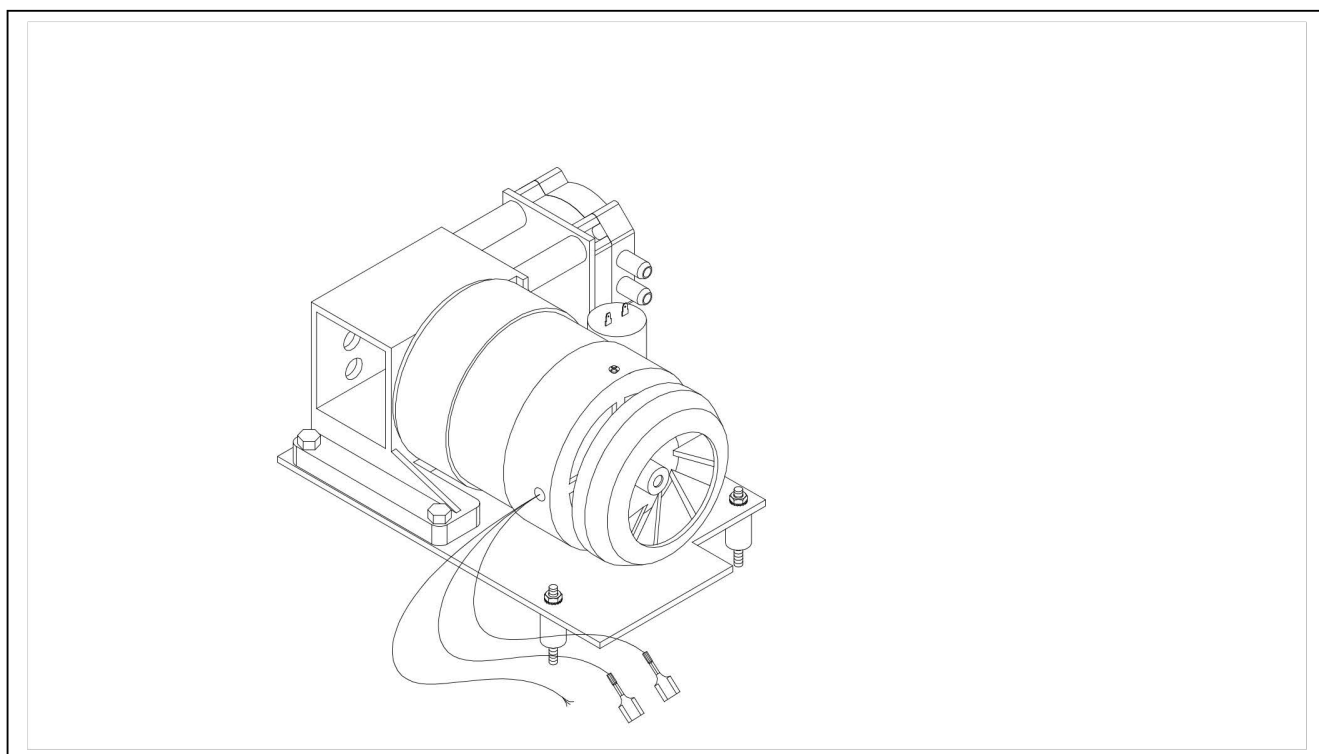

REEMPLAZO DE LOS SOPORTES ANTI VIBRANTES DE ELECTROBOMBA

All the references indicated below refer to the FIG. 7 p. 29 exploded view

Equipamiento Requerido

- Destornillador eléctrico / neumático con brocas para incisión en forma de cruz (o destornillador con forma de cruz)
- Alicates
- Llaves Hexagonal CH7

Pasos para la Reparacion

Pasos de reparación

Apertura

A. Desenchufe el dispositivo de la toma eléctrica.

B Coloque el dispositivo sobre una superficie plana y seca, (cubierta con material antideslizante y antirrayas si es posible) para que el panel de control se dirija al usuario.

C Coloque el dispositivo boca abajo y desatornille los 4 tornillos (POS. 57) en la parte inferior que fijan el panel superior (POS. 44) a la parte inferior (POS. 53). Abra el dispositivo, asegúrese de no tocar las conexiones eléctricas y neumáticas que conectan los componentes en la parte inferior y en el dispositivo y no permita la extracción completa del móvil en sí.

Desconexión de conexiones eléctricas y neumáticas.

Para reemplazar la parte inferior no es necesario operar en los componentes eléctricos y / o neumáticos. Solo es necesario tener cuidado, durante la extracción de la bomba del fondo dañado y durante la inserción de la misma en el componente de repuesto, para no tocar el cableado, de modo que puedan quedar parcial o totalmente desenchufados.

Extracción y sustitución de los soportes anti-vibrantes.

A. Usando una llave hexagonal CH7, desatornille las 3 tuercas (POS. 63) que bloquean los soportes antivibrantes (POS. 1) del motor a la parte inferior, trabajando debajo del dispositivo (POS. 53). Destornille y extraiga los elementos de fijación de la electrobomba.

B. Ahora el motor está libre: sepáralo de la parte inferior

C. Gire la electrobomba (no desenchufe los cables de cableado interno) para verificar cuáles (y cuántos) antivibrantes (POS. 1) están dañados. Coloque la bomba en una superficie recta y, utilizando una llave CH7, extraiga las tuercas y arandelas de los elementos de fijación (POS. 63 - 64) de las piezas dañadas. Extraiga los antivibrantes dañados y sustitúyalos por los repuestos, fijándolos nuevamente con tuercas M6 y arandelas dentadas M6.

D. Tome la electrobomba de reemplazo completa y colóquela en la parte inferior, insertando los antivibrantes en los orificios de la parte inferior. La orientación de la bomba está determinada por los agujeros en la parte inferior. Desde debajo de la parte inferior, atornille, en los antivibrantes visibles, los tres tornillos de fijación (POS. 63) y apriételos fuertemente para bloquear el motor.

Restaurando el dispositivo

A. Coloque de nuevo el móvil en la parte inferior en la posición final y antes de cerrar definitivamente el dispositivo, controle el éxito de la intervención conectándolo a la fuente de alimentación, enciéndalo y verifique que la aspiración máxima (obtenida cerrando el extremo del tubo de succión) sea igual o más de – 0,80 bar (visible en el medidor de vacío).

B. Si todo está bien, desenchufe nuevamente el dispositivo de la fuente de alimentación y cierre la cubierta atornillando los 4 tornillos de fijación (POS. 54), prestando atención al zócalo del portafusibles (POS 54) que debe insertarse en el orificio creado. entre la parte inferior (POS. 53) y la placa superior (POS. 44) del dispositivo. Por el contrario, si el dispositivo no se enciende, si es demasiado ruidoso o presenta algunos problemas con el valor de la presión máxima, desenchúfelo de la fuente de alimentación y controle que las conexiones eléctricas y neumáticas y el acampar de las partes internas están todos completos Si el problema persiste, controle el dispositivo, como se describe en la tabla en la página 7 y / o póngase en contacto con el servicio técnico de CA-MI.

REEMPLAZO DE LA UNIDAD REGULADORA

Todas las referencias indicadas a continuación se refieren a la FIG. 7 p.29 vista despiezada

Equipo requerido

- Destornillador eléctrico / neumático con brocas para incisión en forma de cruz (o destornillador con forma de cruz) •
- Alicates
- Llave hexagonal CH17

PASOS DE REPARACIÓN Apertura móvil.

A. Desenchufe el dispositivo de la toma eléctrica.

B Coloque el dispositivo sobre una superficie plana y seca, (cubierta con material antideslizante y antirayas si es posible) para que el panel de control se dirija al usuario.

C. Coloque el dispositivo boca abajo y desatornille los 4 tornillos (POS. 57) en la parte inferior que fijan el panel superior (POS. 44) a la parte inferior (POS. 53). Abra el dispositivo, asegúrese de no tocar las conexiones eléctricas y neumáticas que conectan los componentes en la parte inferior y en el dispositivo y no permita la extracción completa del móvil en sí.

Desconectar las conexiones neumáticas y sustituir la UNIDAD REGULADORA.

A. Tome el tubo de silicona transparente (POS.29) que se conecta al conector del regulador (POS. 48) que es visible internamente desde el panel de control (POS. 52) con las manos o con alicates y desconéctelo, dejándolo todavía conectado al resto del circuito neumático.

B. Con la llave hexagonal CH17, suelte la tuerca con la arandela (POS. 47 y 66) que aprieta el regulador al móvil. Destornille y extraiga los elementos de fijación y el regulador.

C. Tome la nueva unidad reguladora completa (de POS. 48 a 51) e insértela en el orificio que queda libre en el panel de control (POS. 52); la flecha en el mango debe colocarse hacia abajo, en el lado derecho (aproximadamente 4 horas); Bloquee el regulador a la fijación de disparo desde el interior con una tuerca y un tornillo.


Restaurando el dispositivo

A. Restaure el circuito neumático conectando nuevamente el tubo de aire que queda libre en el dispositivo al tubo de succión de la cabeza. Inserte nuevamente el silenciador con el tubo previamente extraído en el otro extremo de la cabeza y fíjelo como estaba antes de usar una banda específica (POS. 61)

B. Coloque de nuevo el móvil en la parte inferior en la posición final y antes de cerrar definitivamente el dispositivo, controle el éxito de la intervención conectándolo a la fuente de alimentación, encendiéndolo y verificando que la máxima succión (obtenida al cerrar el extremo del tubo de succión) es igual o más de $-0,80$ bar (visible en el medidor de vacío).

C. Si todo está bien, desenchufe nuevamente el dispositivo de la fuente de alimentación y cierre la cubierta atornillando los 4 tornillos de fijación (POS. 54), prestando atención al zócalo del portafusibles (POS 54) que debe insertarse en el orificio creado. entre la parte inferior (POS. 53) y la placa superior (POS. 44) del dispositivo. Por el contrario, si el dispositivo no se enciende, si es demasiado ruidoso o presenta algunos problemas con el valor de la presión máxima, desenchúfelo de la fuente de alimentación y controle que las conexiones eléctricas y neumáticas y el acampar de las partes internas están todos completos Si el problema persiste, controle el dispositivo, como se describe en la tabla en la página 7 y / o póngase en contacto con el servicio técnico de CA-MI.

Fig.4 – Regulator Unit Elements

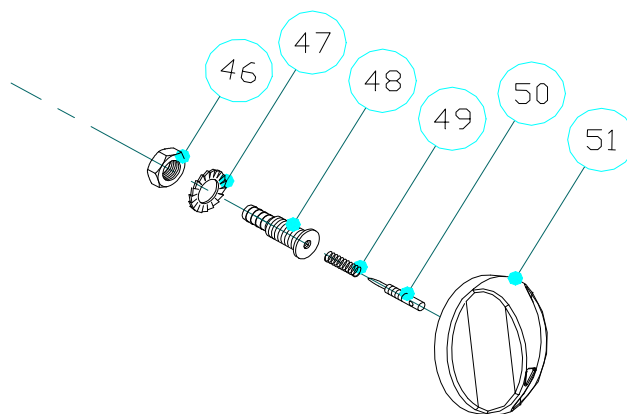

REEMPLAZO DEL CAPACITOR

Todas las referencias indicadas a continuación se refieren a la FIG. 7 p. 29 vista despiezada

Destornillador eléctrico / neumático con brocas para incisión en forma de cruz (o destornillador con forma de cruz) Alicates

- soldadura eléctrica
- Estaño

Pasos de reparación

Apertura

A. Desenchufe el dispositivo de la toma eléctrica.

B Coloque el dispositivo sobre una superficie plana y seca, (cubierta con material antideslizante y antirrayas si es posible) para que el panel de control se dirija al usuario.

C Coloque el dispositivo boca abajo y desatornille los 4 tornillos (POS. 57) en la parte inferior que fijan el panel superior (POS. 44) a la parte inferior (POS. 53). Abra el dispositivo, asegúrese de no tocar las conexiones eléctricas y neumáticas que conectan los componentes en la parte inferior y en el dispositivo y no permita la extracción completa del móvil en sí.

Desenchufando las conexiones eléctricas y sustituyendo el CAPACITOR.

A. Corte las bandas que aprieten los cables finos y desenchufe los extremos del cable del motor (POS.25) del interruptor (POS. 46).

B. Desconecte el condensador dañado (POS. 22) de los extremos de los cables azul y rojo, teniendo cuidado de no tocar otras partes internas.

C. Con las manos o con los alicates, gire el condensador en sentido antihorario y desenroscándolo hasta que quede libre de la bomba deportiva (POS. 5)

D. Inserte el condensador de repuesto en el orificio del soporte del motor del que extrajo el elemento dañado y atorníllelo hasta que quede bien fijado.

Restaurando el dispositivo

A. Restaure el circuito eléctrico (esquema eléctrico en la pág. 28) conectando los extremos de los cables azul y rojo provenientes del motor (POS. 25) a la pieza de repuesto y conecte los extremos de los cables negro y azul del motor a los extremos Dejó libre en el interruptor. Asegúrese de que todos los cables estén bien apretados juntos con las bandas específicas.

B. Coloque de nuevo el móvil en la parte inferior en la posición final y antes de cerrar definitivamente el dispositivo, controle el éxito de la intervención conectándolo a la fuente de alimentación, encendiéndolo y verificando que la máxima succión (obtenida al cerrar el extremo del tubo de succión) es igual o más de -0,80 bar (visible en el medidor de vacío).

C. Si todo está bien, desenchufe nuevamente el dispositivo de la fuente de alimentación y cierre la cubierta atornillando los 4 tornillos de fijación (POS. 54), prestando atención al zócalo del portafusibles (POS 54) que debe insertarse en el orificio creado. entre la parte inferior (POS. 53) y la placa superior (POS. 44) del dispositivo. Por el contrario, si el dispositivo no se enciende, si es demasiado ruidoso o presenta algunos problemas con el valor de la presión máxima, desenchúfelo de la fuente de alimentación y controle que las conexiones eléctricas y neumáticas y el acampar de las partes internas están todos completos Si el problema persiste, controle el dispositivo, como se describe en la tabla en la página 7 y / o póngase en contacto con el servicio técnico de CA-MI.

Durante esta operación, asegúrese de no cortocircuitar los contactos del capacitor con las manos o con ninguna otra herramienta.

REEMPLAZO DEL INTERRUPTOR

Todas las referencias indicadas a continuación se refieren a la FIG. 7 p.30 vista despiezada

Destornillador eléctrico / neumático con brocas para incisión en forma de cruz (o destornillador con forma de cruz)

Destornillador pequeño de cabeza plana para intervención en elementos eléctricos.

Pasos de reparación

Apertura

A. Desenchufe el dispositivo de la toma eléctrica.

B. Coloque el dispositivo en una superficie plana y seca (cubierta con material antirresbaladizo y antirayas si es posible) para que el panel de control se dirija al usuario.

C. Coloque el dispositivo boca abajo y desatornille los 4 tornillos (POS. 57) en la parte inferior que fijan el panel superior (POS. 44) a la parte inferior (POS. 53). Abra el dispositivo, asegúrese de no tocar las conexiones eléctricas y neumáticas que conectan los componentes en la parte inferior y en el dispositivo y no permita la extracción completa del móvil en sí.

Desenchufando las conexiones eléctricas y sustituyendo el INTERRUPTOR.

A. Desconecte los extremos de los cables de cableado interno del componente dañado, dejando los cables aún apretados junto con las bandas.

B. Desde el interior del motor, use un destornillador de punta plana en las palancas de anclaje del interruptor (POS. 46) para poder extraerlo del panel de control (POS. 52).

C. Inserte el interruptor de repuesto en el orificio que queda libre en el panel de control, de modo que el símbolo I se dirija a la unidad del medidor de vacío (POS. 45). Asegúrese de que las palancas de anclaje estén bien fijadas.

Restaurando el dispositivo

B. Restaure el circuito eléctrico (esquema eléctrico en la página 28) conectando nuevamente los cables de cableado eléctrico interno al interruptor de la siguiente manera:

- Conecte los dos cables finos que vienen del enchufe de alimentación (POS. 55) a los contactos del interruptor en la posición O
- Conecte los cables finos que vienen del motor (POS. 25) y del condensador a los contactos del interruptor en la posición I.

Asegúrese siempre de que los cables estén bien apretados juntos con las bandas específicas.

C. Coloque de nuevo el móvil en la parte inferior en la posición final y antes de cerrar definitivamente el dispositivo, controle el éxito de la intervención conectándolo a la fuente de alimentación, encendiéndolo y verificando que la aspiración máxima (obtenida cerrando el extremo del tubo de succión) es igual o más de -0,80 bar (visible en el medidor de vacío).

D. Si todo está bien, desenchufe nuevamente el dispositivo de la fuente de alimentación y cierre la cubierta atornillando los 4 tornillos de fijación (POS. 54), prestando atención al zócalo del portafusibles (POS 54) que debe insertarse en el orificio creado. entre la parte inferior (POS. 53) y la placa superior (POS. 44) del dispositivo. Por el contrario, si el dispositivo no se enciende, si es demasiado ruidoso o presenta algunos problemas con el valor de la presión máxima, desenchúfelo de la fuente de alimentación y controle que las conexiones eléctricas y neumáticas y el acampar de las partes internas están todos completos Si el problema persiste, controle el dispositivo, como se describe en la tabla en la página 7 y / o póngase en contacto con el servicio técnico de CA-MI.

REEMPLAZO DE LA CARPETA FUSIBLE CARRERA

Todas las referencias indicadas a continuación se refieren a la FIG. 7 p. 29 vista despiezada

Destornillador eléctrico / neumático con brocas para incisión en forma de cruz (o destornillador con forma de cruz) Alicates

- soldadura eléctrica
- Estaño

Pasos de reparación

Apertura

A. Desenchufe el dispositivo de la toma eléctrica.

B. Coloque el dispositivo en una superficie plana y seca (cubierta con material antirresbaladizo y antirayas si es posible) para que el panel de control se dirija al usuario.

C. Coloque el dispositivo boca abajo y desatornille los 4 tornillos (POS. 57) en la parte inferior que fijan el panel superior (POS. 44) a la parte inferior (POS. 53). Abra el dispositivo, asegúrese de no tocar las conexiones eléctricas y neumáticas que conectan los componentes en la parte inferior y en el dispositivo y no permita la extracción completa del móvil en sí.

Desenchufando las conexiones eléctricas y sustituyendo el SOPORTE DEL CARTADOR DE FUSIBLES

A. Desconecte los extremos de los dos cables delgados que vienen del interruptor (POS. 46), colocados en el panel de control (POS. 52), tomándolos aún apretados juntos con la banda específica.

B. Ahora es posible reemplazar el componente dañado con la pieza de repuesto.

Restaurando el dispositivo

A. Restaure el circuito eléctrico (esquema eléctrico en la página 28) conectando nuevamente los cables de cableado eléctrico interno del interruptor de la siguiente manera:

B. Los dos cables finos de interruptor (POS.46), colocados en el panel de control (POS. 52) deben conectarse a los dos contactos del zócalo del portafusibles.

C. Asegúrese siempre de que los cables estén bien apretados juntos con las bandas específicas.

D. Abra la cámara de conexión del portafusibles e inserte 1 fusible de vidrio (5x20) F1.6A

E. Coloque de nuevo el móvil en la parte inferior en la posición final y antes de cerrar definitivamente el dispositivo, controle el éxito de la intervención conectándolo a la fuente de alimentación, encendiéndolo y verificando que la aspiración máxima (obtenida cerrando el extremo del tubo de succión) es igual o más de -0,80 bar (visible en el medidor de vacío).

F. Si todo está bien, desenchufe nuevamente el dispositivo de la fuente de alimentación y cierre la cubierta atornillando los 4 tornillos de fijación (POS. 54), prestando atención al zócalo del portafusibles (POS 54) que debe insertarse en el orificio creado. entre la parte inferior (POS. 53) y la placa superior (POS. 44) del dispositivo. Por el contrario, si el dispositivo no se enciende, si es demasiado ruidoso o presenta algunos problemas con el valor de la presión máxima, desenchúfelo de la fuente de alimentación y controle que las conexiones eléctricas y neumáticas y el acampar de las partes internas están todos completos Si el problema persiste, controle el dispositivo, como se describe en la tabla en la página 7 y / o póngase en contacto con el servicio técnico de CA-MI.

REEMPLAZO DE LA UNIDAD DE MEDIDOR DE VACÍO

Todas las referencias indicadas a continuación se refieren a la FIG. 7 p. 29 vista despiezada

Destornillador eléctrico / neumático con brocas para incisión en forma de cruz (o destornillador con forma de cruz)

Alicates

- Llave hexagonal CH18

Pasos de reparación

Apertura

A. Desenchufe el dispositivo de la toma eléctrica.

B Coloque el dispositivo sobre una superficie plana y seca, (cubierta con material antideslizante y antirayas si es posible) para que el panel de control se dirija al usuario.

C. Coloque el dispositivo boca abajo y desatornille los 4 tornillos (POS. 57) en la parte inferior que fijan el panel superior (POS. 44) a la parte inferior (POS. 53). Abra el dispositivo, asegúrese de no tocar las conexiones eléctricas y neumáticas que conectan los componentes en la parte inferior y en el dispositivo y no permita la extracción completa del móvil en sí.

Desconexión de las conexiones neumáticas y sustitución de la UNIDAD DE MEDIDOR DE VACÍO

A. Trabajando con las manos o con alicates a través del orificio del móvil, libre después de la extracción de la rejilla de aire, retire los tubos de silicona transparentes 6x10 (POS.29) conectados con el conector del medidor de vacío (POS. 45), que aparece en El interno del panel de control (POS.447). Desconéctelo de la parte dañada y déjelo conectado al circuito neumático restante.

B. Inserte el destornillador de cabeza plana en el orificio y utilícelo para desatornillar las dos bielas de conexión del medidor de vacío. Gire ligeramente el medidor de vacío hasta que salga del sistema de bloqueo y extraígallo de la parte móvil, operando desde el exterior. Trabajando desde el interior levante el sistema de bloqueo y extraígallo.

C. Tome la nueva unidad de medidor de vacío (POS.45) e insértela en el orificio que queda libre en el panel de control.

Restaurando el dispositivo

A. Restaurar el circuito neumático reconectando fuertemente el tubo de aire que queda libre al conector del medidor de vacío


B. Coloque de nuevo el móvil en la parte inferior en la posición final y antes de cerrar definitivamente el dispositivo, controle el éxito de la intervención conectándolo a la fuente de alimentación, encendiéndolo y verificando que la máxima succión (obtenida al cerrar el extremo del tubo de succión) es igual o más de -0,80 bar (visible en el medidor de vacío).

C. Si todo está bien, desenchufe nuevamente el dispositivo de la fuente de alimentación y cierre la cubierta atornillando los 4 tornillos de fijación (POS. 54), prestando atención al zócalo del portafusibles (POS 54) que debe insertarse en el orificio creado. entre la parte inferior (POS. 53) y la placa superior (POS. 44) del dispositivo. Por el contrario, si el dispositivo no se enciende, si es demasiado ruidoso o presenta algunos problemas con el valor de la presión máxima, desenchúfelo de la fuente de alimentación y controle que las conexiones eléctricas y neumáticas y el acampar de las partes internas están todos completos Si el problema persiste, controle el dispositivo, como se describe en la tabla en la página 7 y / o póngase en contacto con el servicio técnico de CA-MI.

NOTAS

La fabricación de CA-MI siempre recomienda reemplazar todo el conjunto de tuberías internas que constituye el circuito neumático, siempre que se requiera tal intervención. Este reemplazo es necesario para restaurar totalmente la eficiencia del circuito de succión. Por esta razón están disponibles kits de reemplazo específicos.

Fig.5 – Vacuum Metre Unit Elements

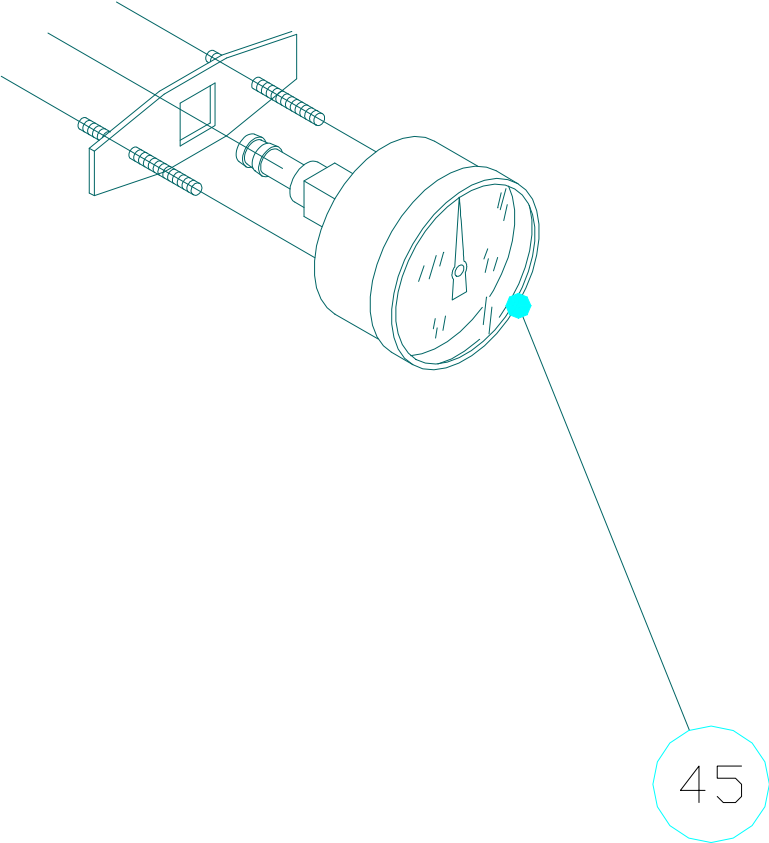

REEMPLAZO DE LA MANIJA

Todas las referencias indicadas a continuación se refieren a la FIG. 7 p.29 vista despiezada

Equipo requerido

- A. Destornillador eléctrico / neumático con puntos / taladros para incisión en forma de cruz (o destornillador de punta en forma de cruz)
- B. Llave hexagonal CH10

Pasos de reparación

Apertura

- A. Desenchufe el dispositivo de la toma eléctrica.
- B Coloque el dispositivo sobre una superficie plana y seca, (cubierta con material antideslizante y antirayas si es posible) para que el panel de control se dirija al usuario.
- C. Coloque el dispositivo boca abajo y desatornille los 4 tornillos (POS. 57) en la parte inferior que fijan el panel superior (POS. 44) a la parte inferior (POS. 53). Abra el dispositivo, asegúrese de no tocar las conexiones eléctricas y neumáticas que conectan los componentes en la parte inferior y en el dispositivo y no permita la extracción completa del móvil en sí.

Reemplazo de la manija

- A. Suelte la liberación de la llave hexagonal CH10 que se encuentra dentro de los 4 tornillos (POS. 56) que aprietan la manija (POS. 43) al panel superior (POS. 44) del dispositivo. Destornille y extraiga los elementos de fijación liberando el componente a reemplazar.
- B. Coloque la manija de reemplazo y colóquela de manera que los orificios que quedaron libres en el panel superior queden orientados hacia ella; fije la manija en el panel, fijándola desde el interior con tornillos de fijación (POS. 56).

Restaurando el dispositivo

- A. Antes de cerrar el móvil, verifique el bloqueo del mango tirando de él.
- B. Si todo está bien, sigue cerrando el móvil y arreglando el fuego.

REEMPLAZO DE LA PARTE INFERIOR

Todas las referencias indicadas a continuación se refieren a la FIG. 7 p. 29 vista despiezada

Equipo requerido

- Destornillador eléctrico / neumático con brocas para incisión en forma de cruz (o destornillador con forma de cruz)
- Llave hexagonal

Pasos de reparación

Apertura

A. Desenchufe el dispositivo de la toma eléctrica.

B Coloque el dispositivo sobre una superficie plana y seca, (cubierta con material antideslizante y antirayas si es posible) para que el panel de control se dirija al usuario.

C. Coloque el dispositivo boca abajo y desatornille los 4 tornillos (POS. 57) en la parte inferior que fijan el panel superior (POS. 44) a la parte inferior (POS. 53). Abra el dispositivo, asegúrese de no tocar las conexiones eléctricas y neumáticas que conectan los componentes en la parte inferior y en el dispositivo y no permita la extracción completa del móvil en sí.

Desconexión de conexiones eléctricas y neumáticas.

Para reemplazar la parte inferior no es necesario operar en los componentes eléctricos y / o neumáticos. Solo es necesario tener cuidado, durante la extracción de la bomba del fondo dañado y durante la inserción de la misma en el componente de repuesto, para no tocar el cableado, de modo que puedan quedar parcial o totalmente desenchufados.

Desconecte la electrobomba y reemplace la parte inferior del dispositivo

A. Utilizando la liberación de la llave hexagonal, trabajando debajo del dispositivo (POS. 53), las 3 tuercas de fijación (POS. 63) que fijan los pernos antivibrantes (POS.1) del motor a la parte inferior.

B. Ahora el motor se puede separar de la parte inferior del dispositivo (tenga cuidado de no dañar los cables de cableado internos). Inserte en la pieza de repuesto la electrobomba insertando sus antivibrantes en los orificios del nuevo fondo. La orientación de la bomba está determinada por la posición de los orificios en la parte inferior. Trabajando debajo del tornillo, atornille las 3 tuercas de fijación (POS. 63) en los antivibrantes y apriételes fuertemente para fijar el motor.

Restaurando el dispositivo

A. Coloque de nuevo el móvil en la parte inferior en la posición final y antes de cerrar definitivamente el dispositivo, controle el éxito de la intervención conectándolo a la fuente de alimentación, enciéndalo y verifique que la aspiración máxima (obtenida cerrando el extremo del tubo de succión) sea igual o más de -0,80 bar (visible en el medidor de vacío).

B. Si todo está bien, desenchufe nuevamente el dispositivo de la fuente de alimentación y cierre la cubierta atornillando los 4 tornillos de fijación (POS. 54), prestando atención al zócalo del portafusibles (POS 54) que debe insertarse en el orificio creado. entre la parte inferior (POS. 53) y la placa superior (POS. 44) del dispositivo. Por el contrario, si el dispositivo no se enciende, si es demasiado ruidoso o presenta algunos problemas con el valor de la presión máxima, desenchúfelo de la fuente de alimentación y controle que las conexiones eléctricas y neumáticas y el acampar de las partes internas están todos completos Si el problema persiste, controle el dispositivo, como se describe en la tabla en la página 7 y / o póngase en contacto con el servicio técnico de CA-MI.

Fig. 6 – NEW ASKIR 30 REF RE 310100/02 ELECTRIC DIAGRAM

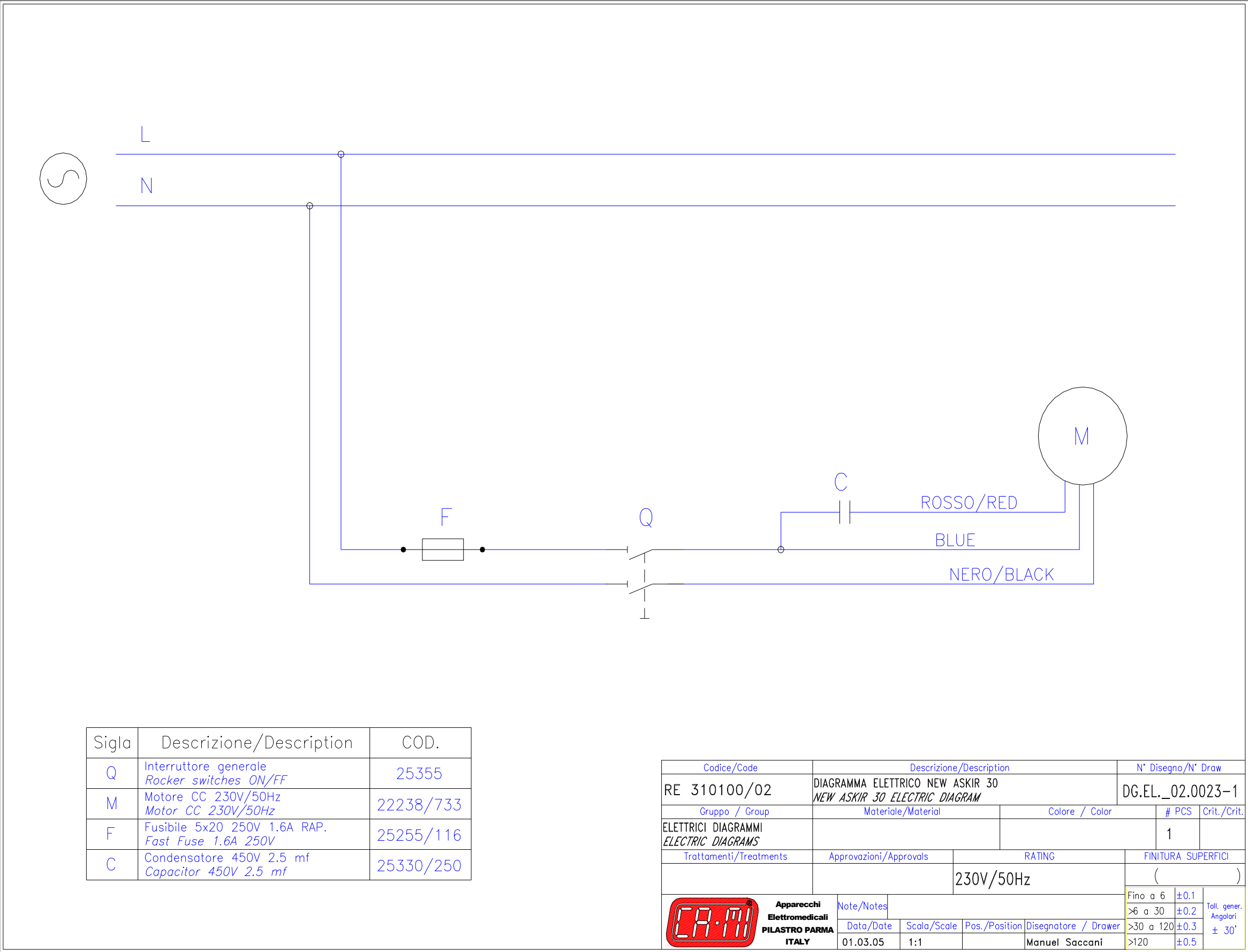


Fig. 7 – NEW ASKIR 30 REF RE 310100/02 (rif. ED.AS._04.0010-2) EXPLODED VIEW

